




НОВИНКА

ДЛЯ КОМФОРТУ ЛІКАРЯ ТА ПАЦІЄНТА

Електричне Гінекологічне Крісло



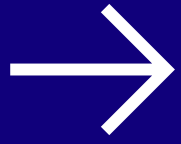

Гінекологічне крісло, яке **адаптується** до пацієнтки

- Електричне ножне регулювання
- Комфортне позиціонування
- Продумана ергономіка для проведення оглядів, діагностичних і лікувальних процедур.

Широкий діапазон налаштувань дозволяє адаптувати положення крісла до фізичних можливостей пацієнтки та особливостей кожної процедури.





Електричне позиціонування - **зручність** для лікаря




Висота сидіння та нахил спинки регулюються за допомогою ногового пульта управління.

- Діапазон висоти сидіння: 500-1000 мм,
- Діапазон нахилу спинки: від 0° до 70°.

Дві окремі секції пульта дозволяють швидко змінювати параметри положення крісла без зайвих фізичних зусиль.

Живлення здійснюється від мережі 230 В.



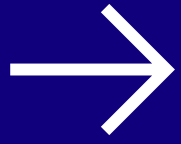

Низьке початкове положення - **більше** доступності

Мінімальна висота сидіння 500 мм полегшує посадку та пересаджування пацієнток із різним рівнем мобільності.

Водночас підйом до 1000 мм забезпечує лікарю можливість встановити зручну робочу висоту.

Допустиме навантаження крісла становить 190 кг.






М'які елементи та різноманіття кольорів



Сидіння, спинка та секція для підтримки ніг мають м'які елементи товщиною 50 мм, оббиті медичним шкірзамінником із підвищеною зносостійкістю.

Доступні інші варіанти кольору оббивки: салат, персик, слива, блакить, тощо.



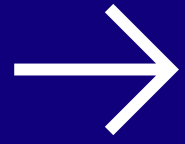

Індивідуальна підтримка ніг, рук, голови

Знімні регульовані 3D-опори для підтримки гомілок дозволяють налаштувати положення ніг відповідно до анатомічних особливостей пацієнтки.

Підйомна секція для ніг з анатомічним вирізом регулюється механізмом «тріскачка» у 8 положеннях.

Опори для рук із нержавіючої сталі допомагають пацієнтці зберігати стабільне положення під час посадки й огляду.

Подушка фіксується на необхідній висоті за допомогою магнітів.






Горизонтальне положення для **розширення** функціональності



Спинка та секція для ніг
розкладаються в горизонтальне
положення довжиною 1700 мм.



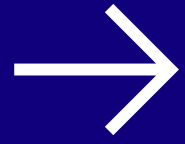

Практичність **у роботі** медичного персоналу

Крісло обладнене:

- Колісними опорами діаметром 100 мм, завдяки чому його може легко переміщати одна людина
- Висувним знімним гінекологічним лотком із нержавіючої сталі об'ємом 1,2 л
- Тримачем для одноразових рушників і простирадл зі спанбонду

Матеріали крісла розраховані на регулярну експлуатацію в медичному середовищі: сталевий каркас має захисне епокси-поліефірне порошкове покриття, а медичний шкірзамінник – підвищену зносостійкість і придатність до регулярної дезінфекції.





Універсальне рішення для сучасної гінекології




Функціонал крісла дозволяє адаптувати його до різних сценаріїв використання та потреб пацієнток.

Завдяки низькому положенню сидіння та електричному плавному позиціонуванню крісло підходить для організації інклюзивного гінекологічного огляду пацієнток з обмеженою мобільністю.

Комфорт пацієнтки. Контроль лікаря. Більше можливостей для сучасної гінекологічної практики.



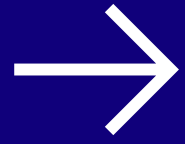

Гнучка **комплектація** під потреби та бюджет

Крісло може постачатися у спрощеній комплектації для оптимізації вартості без втрати основної функціональності:

- без подушки;
- без опор для рук;
- без тримача для рушників.



Одне крісло - **більше** можливостей



- Електрична зміна висоти / нахилу спинки: 500-1000 мм / 0-70°, ножний пульт управління
- М'які елементи ложа: товщина 50 мм
- 3D-опори для гомілок: знімні, регульовані
- Опори для рук: нержавіюча сталь
- Секція для ніг: 8 положень, механізм «тріскачка»
- Гінекологічний лоток: нержавіюча сталь, 1,2 л
- Горизонтальне положення: 1700 мм (кушетка)
- Колісні опори: Ø100 мм
- Допустиме навантаження: до 190 кг
- Живлення: 230 В
- Вага: 62 кг



+380 67 214 05 50, +380 67 159 79 28



info@amed.ua



amed.ua

ЗАМОВИТИ